



ValView

Valab® BI-Modul

Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihres Labors ganz einfach!

Dank der statistischen Analysen Ihres Valab®



Erleichtern Sie
die Wartung und
kontinuierliche Kontrolle



Die Effizienz der
Validierung durch
Valab® steigern



Optimierung des
Managements in
Übereinstimmung mit den
Anforderungen
der ISO 15189

www.valab.com

Mit ValView haben Sie mit wenigen Mausklicks Zugriff auf die gesamte Aktivität Ihres Labors!


4 Dashboards

8 Schlüsselindikatoren für Produktion und Überwachung

Mit anpassbaren Zeitintervallen

Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihres Labors **auf einen Blick**

Visualisieren Sie Ihre Produktionsindikatoren für den Zeitraum Ihrer Wahl: täglich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich.

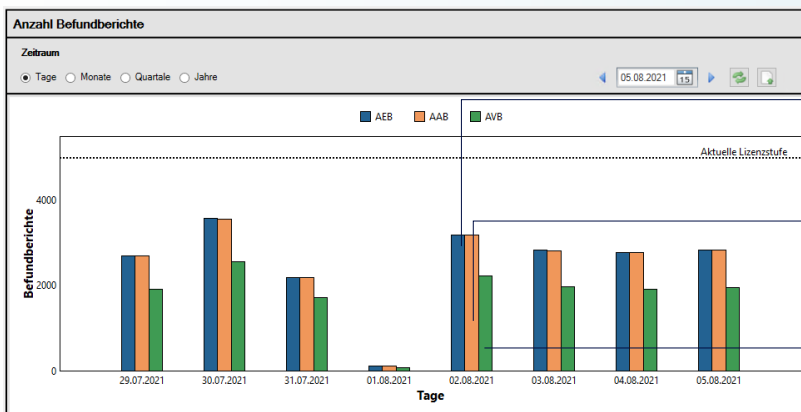

- AEB:** Anzahl der empfangenen Befundberichte
- AAB:** Anzahl der untersuchten Befundberichte
- AVB:** Anzahl der validierten Befundberichte

Rangfolge der am häufigsten blockierten Analysen nach Ablehnungskriterien

1 Korrelation

Test	Anz	% (AAB)
COVID-19 IgM	1960	2.61
Triglyceride	1112	1.48
Leukozyten	1028	1.37

2 Anteriorität

Test	Anz	% (AAB)
Kalium	1039	1.38
Thrombozyten	834	1.11
TSH	796	1.06

3 Außerhalb der kritischen Grenzwerte

Test	Anz	% (AAB)
COVID-19 IgM	2164	2.88
COVID-19 RT-qPC	375	0.5
COVID	355	0.47


Betrachten Sie diese Entwicklungen über einen ausgewählten Zeitraum: täglich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich



Unzureichende Validierungsrate, kritische Drift... Für eine genauere Analyse können Sie in Ihrem Dashboard die am häufigsten blockierten Analysen nach Ablehnungskriterien filtern!

Verfolgen Sie die Veränderungen der Validierungsrate (AVB/AAB)

Ihres Valab® im Zeitverlauf entsprechend dem Zielintervall Ihres Labors

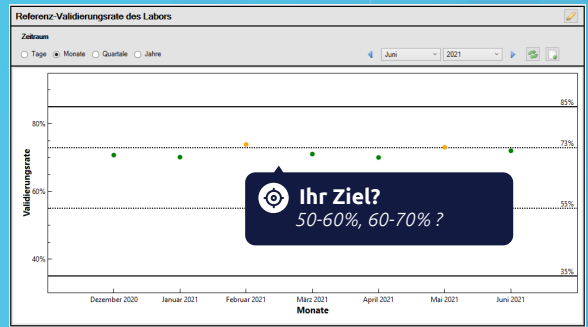

Ein Farbsystem zur Erleichterung der Lesbarkeit Ihrer Ergebnisse:

- Grün: Standard/Leistungsstark
- Orange: Restrictiv vs Freizügig
- Rot: Ungenügend

Mit den konfigurierbaren Grenzwerten passen Sie Ihre Grafiken an Ihre Referenzsätze an!

Indikatoren	Rate (%)	Interpretation*	Drift (%)	Interpretation*
Begutachtungsrate (AAB/AEB)	99.77	Nominal	+0.24	Stabil
Validierungsrate (AAB)	70.34	Leistungsstark	-1.7	Nicht signifikanter Rückgang
Korrelation (AAB)	19.93	Nominal	+1.24	Stabil
Anteiligkeit (AAB)	12.65	Nominal	+0.6	Stabil
Außerhalb der kritischen Grenzwerte (AAB)	8.13	Nominal	+1.61	Erhöhung nicht signifikant

Entdecken Sie die Trends und Schwankungen der Valab®-Raten

Anhand der Details in Ihrem Dashboard können Sie schnell analysieren, wie sich die Leistung Ihres Valab® entwickelt!

Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse anhand von drei Ablehnungsgründen: Korrelation, Vorhergehendes, Außerhalb der Grenzen.

Was spiegelt sich in der Entwicklung Ihrer Valab® Indikatoren wider?

Dies werden Sie durch das Vorhandensein des %-Drifts und seiner Interpretation erkennen

Wie ist Ihr Valab® kalibriert?

Zu **restrictiv**, **freizügig** oder **perfekt angepasst**?

Wo finden Sie mehr Details zur Analyse Ihrer Ergebnisse?

Unsere **Infobubbles*** sollten Sie darüber aufklären

* Finden Sie unsere Infobubbles in jedem Dashboard

Mit dem interpretativen Monitoring von ValView erkennen Sie schnell Abweichungen Ihrer Validierungsraten!

Ihr Dashboard erfasst und detailliert die Aufwärts- und Abwärtsdrifts:


APV (Anzahl der Parametervalidierungen) ABP (Anzahl von Befundberichten mit diesem Parameter)

Test	% ABVP (N)	ABVP (N)	% ABVP (N-1)	ABP (N-1)	Drift % ABVP	Interpretation*
BNP	87.58	1031	77.63	1605	9.95	Verbesserung
COVID-19 IgM	50.17	4343	40.18	2414	9.99	Verbesserung
Glucose Urinaire	77.53	1148	71.98	1199	5.55	Verbesserung
G Globuline	93.54	758	91.45	854	2.08	Erhöhung nicht signifikant
Tréponématoze	98.83	858	97.89	759	0.94	Stabil
Phosphate	91.87	2422	90.95	2674	0.92	Stabil
AZ Globuline	93.8	758	95.55	854	-1.75	Nicht signifikanter Rückgang
Borreliose Ac	80.69	963	84.05	934	-3.36	Verschlechterung

(N-1) als vorherige Periode; (N) aktuelle Periode

- ▲ Zu begründende Verbesserung
- ▲ **Verbesserung**
- ▲ Nicht signifikante Erhöhung
- ▼ **Stabil**
- ▼ Nicht signifikante Abnahme
- ▼ **Verschlechterung**

Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihres Labors mit **wenigen Mausklicks!**

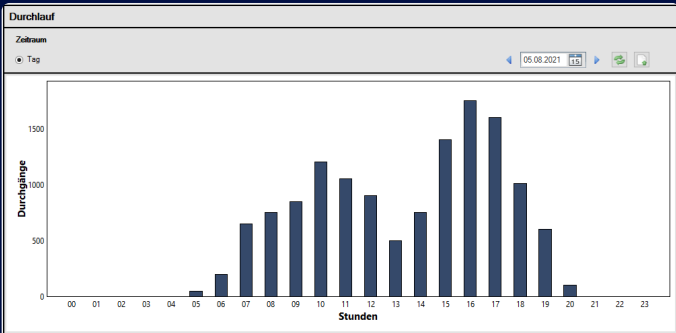

Eine Übersicht über den Aktivitätenfluss stündlich

Darstellung des Versands von Aktenrahmen vom SIL zu Valab® im Verlauf eines Tages.



Überwachung der Aktivitäten in Ihrem Labor



Vereinfachtes Ablesen Ihrer Indikatoren



Qualitätsoptimierung und -überwachung

Möchten Sie mehr über ValView erfahren?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren



contact@valab.com



+33 (0) 531 083 499



www.valab.com

ValView

12.09.2024